



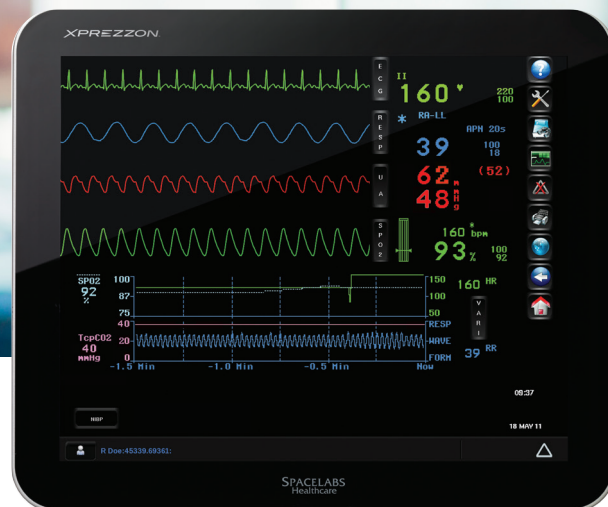

SPACELABS
HEALTHCARE

MONITORAGGIO PAZIENTE
Monitor da posto letto Xprezzon®

Massima
espressione
di prestazioni
e design

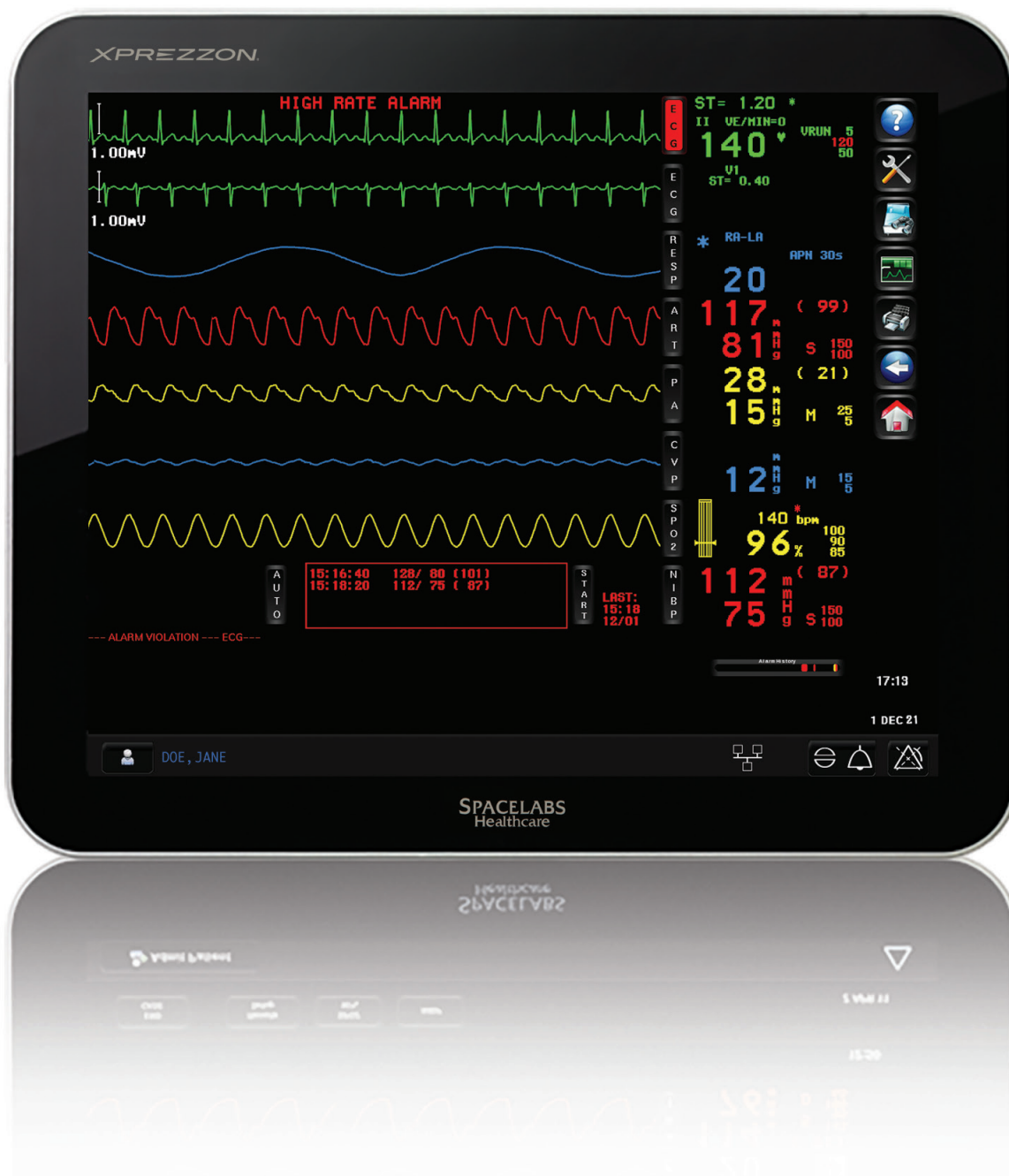

Reattivo e versatile

Spacelabs Xprezzon® è un monitor modulare ad alta criticità adatto per cure neonatali, pediatriche e agli adulti, oltre che per l'ambiente perioperatorio. Il display con schermo touch screen Spacelabs da 19 pollici e le svariate configurazioni consentono di adattare Xprezzon ai vincoli di spazio di ogni ambiente clinico. Gli schermi clinici e l'interfaccia utente vengono armonizzati con i monitor paziente Qube® e Qube Mini® per semplificare l'apprendimento e la navigazione.



Xprezzon favorisce il riposo notturno dei pazienti riducendo automaticamente la luminosità del display in risposta alla diminuzione della luce ambientale.



Le soluzioni di montaggio ergonomiche e versatili migliorano l'aspetto generale dell'ambiente di cura.

Interconnessione tra personale clinico e informazioni del paziente.

Xprezzon permette di accedere facilmente ai dati dei pazienti generando informazioni per il medico presso il punto di cura. Il doppio display opzionale consente di dedicare uno schermo alla visualizzazione delle informazioni fisiologiche e uno schermo a una presentazione alternativa dei dati clinici del paziente.

Varie soluzioni per il monitor e la gestione dei cavi garantiscono un flusso operativo più organizzato ed efficiente al posto letto.



**Display da
19" e luci di
allarme (LED)
integrate ad
alta visibilità**

Luminoso

Il design moderno e innovativo conferisce un aspetto rassicurante sia per i pazienti che per i loro familiari. L'elegante display senza cornice è dotato di luci di allarme (LED) integrate chiaramente visibili. Si illuminano sia sul lato anteriore che posteriore per facilitare l'identificazione del monitor che ha generato l'allarme anche in ambienti di cura densi di apparecchiature.

Monitor per pazienti ad alta intensità clinica



Visualizzazione delle tendenze

Uno schermo ad alta risoluzione consente di visualizzare in modo nitido e ben definito le tendenze personalizzate per giungere a valutazioni dei pazienti più rapide e meglio informate. È sufficiente un solo tocco per accedere alle diverse visualizzazioni delle tendenze, in base alle esigenze di osservazione, al tipo di procedura o ai protocolli clinici. Le tendenze possono essere visualizzate in modo continuativo per avere sempre a disposizione gli aggiornamenti delle informazioni critiche del paziente in tempo reale. Possono inoltre essere ridimensionate e organizzate nel modo preferito, offrendo al personale clinico la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per scopi specifici.

Connesso

La connettività di Xprezzon protegge gli investimenti effettuati su precedenti generazioni di sistemi di monitoraggio e informativi di Spacelabs. La compatibilità di Xprezzon con i sistemi precedenti consente una transizione immediata e completa tra le varie piattaforme.

Xprezzon memorizza fino a 96 ore di tendenze e funzionalità di visualizzazione in remoto, eventi di allarme e quattro formati della schermata principale selezionabili dall'utente, inclusi i caratteri numerici di grandi dimensioni. Xprezzon è dotato di serie di due slot per moduli ed è espandibile con l'alloggiamento opzionale per moduli a due slot 90499 per supportare ulteriori moduli di parametri speciali Spacelabs, quali BISx, Multigas, Capnografia e SvO₂/ScvO₂. Se distribuito con la centrale di monitoraggio Spacelabs Xhibit® e la Clinical Suite Intesys®, Xprezzon offre la connettività aziendale per l'EMR ospedaliero, i sistemi di gestione degli ECG, i sistemi cercapersone e le soluzioni di accesso remoto.






Fino a
8 forme d'onda,
24 parametri

Informazioni altamente affidabili dove e quando ne avete bisogno

Lo schermo ad alta risoluzione consente di visualizzare in modo nitido e ben definito le tendenze personalizzate per giungere a valutazioni dei pazienti più rapide e meglio informate. È sufficiente un solo tocco per accedere alle diverse visualizzazioni delle tendenze, in base alle esigenze di osservazione, al tipo di procedura o ai protocolli clinici. Le tendenze possono essere visualizzate in modo continuativo per avere sempre a disposizione gli aggiornamenti delle informazioni critiche del paziente in tempo reale. Possono inoltre essere ridimensionate e organizzate nel modo preferito, offrendo al personale clinico la possibilità di creare visualizzazioni personalizzate per scopi specifici. Le informazioni relative al monitoraggio dei pazienti sono sempre a portata di mano.


Sia all'interno dell'ospedale che durante i trasporti, il personale clinico ha la possibilità di rimanere connesso al paziente. L'innovativo sistema ICS di Spacelabs offre il massimo livello di libertà e affidabilità, grazie all'accesso alle informazioni del paziente su un dispositivo mobile del personale clinico.

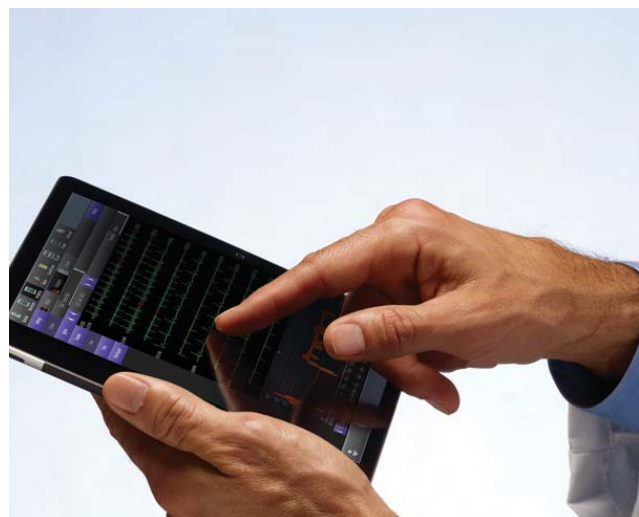



Perfetta integrazione ed esperienza utente


Gli schermi clinici e l'interfaccia utente vengono armonizzati con i monitor paziente Qube® e Qube Mini per semplificare l'apprendimento e la navigazione. La retrocompatibilità di Xprezzon presenta una transizione senza soluzione di continuità tra le piattaforme, per integrare il vostro investimento nelle precedenti generazioni di sistemi informativi e di monitoraggio dei pazienti Spacelabs.

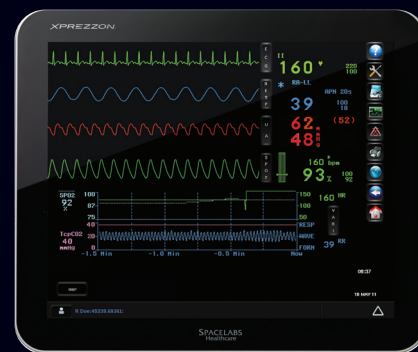

Panoramica di Xprezzon

- Cavi ECG a 3, 5 terminali per 12 derivazioni diagnostiche, Resp, SpO₂, PSNI, Temp
- Fino a 8 pressioni arteriose invasive (espandibili a 8) e gittata cardiaca
- Fino a 8 forme d'onda, 24 parametri
- Display da 19" e luci di allarme LED integrate (anteriori e posteriori) ad alta visibilità
- Esame letto completo dei monitor da posto letto remoti
- Calcoli dei segni vitali
- Connettività EMR con ICS
- Data Shuttle per il trasferimento dei dati dei pazienti di 24 ore
- Predisposizione per lettori di codici a barre USB
- Stampante/registratore opzionale, capnografia, multigas, BISx, SvO₂ e moduli SpO₂ doppi
- OCRG Varitrend® 4
- Termometro Spot Check USB Exergen (opzionale)

Le funzionalità possono variare in base alla configurazione acquistata.

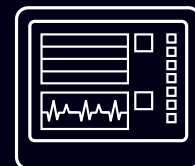



Sempre al vostro fianco.

Spacelabs è stato il pioniere nell'introduzione del monitoraggio telemetrico e di innovazioni nel monitoraggio paziente e continua ad offrire soluzioni cliniche efficienti per aiutarvi a fornire l'esperienza che i vostri pazienti richiedono, semplificando al tempo stesso la gestione delle risorse per soddisfare le necessità quotidiane. Dalla pianificazione strategica fino all'assistenza post-installazione, Spacelabs è sempre a disposizione offrendoti personale qualificato, i prodotti e i servizi TeamUp™ giusti, dove e quando occorrono.

www.spacelabshealthcare.com

35301 SE Center Street, Snoqualmie, WA 98065

T: +1 425 396 3300 | F: +1 425 396 3301

Unit B, Foxholes Centre, John Tate Road, Hertford, SG13 7DT, UK

T: +44 (0) 1992 507700 | F: +44 (0) 1992 501213

© 2024 Spacelabs Healthcare. Le specifiche possono subire variazioni senza preavviso. Numero di parte 030-2105-00 Rev C

SPACELABS
HEALTHCARE

An OSI Systems Company